

LINEA

 Articolo **9001**

 Categoria commerciale **FASCIA REGOLABILE POSIZIONATORE PROTESI**


Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

 COTONE 85%  
 ELASTAN 15%

100%

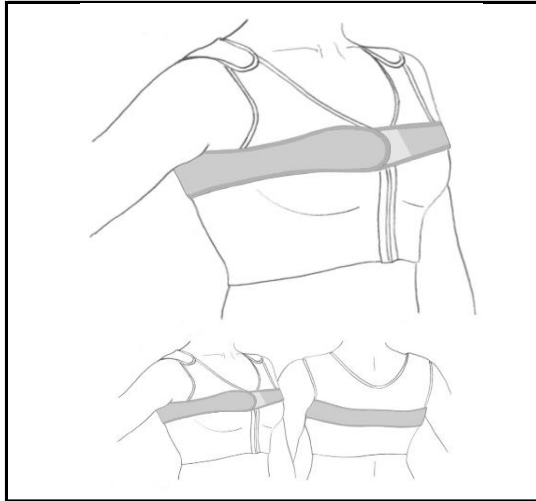

Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S 82-100 L 92-110

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

Posizionare sulla parte superiore del seno, tensionare la fascia e richiudere mediante la fermatura velcroabile.

Indicazioni

Nell'immediato post-operatorio aiuta ad esercitare una pressione costante verso il basso delle protesi.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.