


GERMOCID

SPRAY

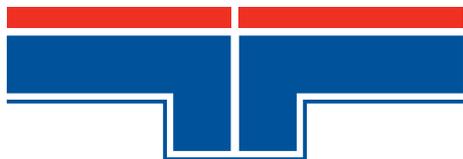

**DISINFETTANTE AMBIENTALE
AD ALTO POTERE BATTERICIDA
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**

**LOCAL DISINFECTANT WITH
HIGH BACTERICIDAL POWER
MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT**



GERMOCID SPRAY
DISINFETTANTE AMBIENTALE
AD ALTO POTERE BATTERICIDA

**NON BRUCIA
GRADEVOLMENTE PROFUMATO**

Disinfetta gli ambienti chiusi, ambulatori medici, gabinetti dentistici, gli impianti igienici, gli oggetti, le superfici lasciando un gradevole profumo.

ISTRUZIONI D'USO: Per la disinfezione di ambienti di normali dimensioni non superare l'erogazione di 3 o 4 secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l'alto. Far precedere una accurata pulizia delle superfici poi spruzzare uniformemente il preparato e lasciare agire per almeno 10 minuti.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non contaminare con il prodotto alimenti o bevande o recipienti destinati a contenerne. Non impiegare il prodotto in quantità eccessiva od impropria. Non usare insieme ad altri preparati. Non macchia. Non usare sulla cute lesa e sulle mucose. Gas liquefatto altamente infiammabile. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Irritante per gli occhi. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incendio usare CO₂, schiuma, polvere chimica. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

COMPOSIZIONE: 100 gr contengono: O-Fenilfenolo 20 mg, Cloruro di Alchil-Benzil-Oleil ammonio 100 mg, Composizione di olii essenziali: Alcool isopropilico, Coformulanti e Propellenti q.b. a 100 gr.

Reg. Ministero della Salute n. 7604
Il numero di lotto e la data di scadenza,
sono indicati sul fondo della bombola.



**FACILMENTE
INFIAMMABILE**



IRRITANTE

GERMOCID SPRAY
LOCAL DISINFECTANT WITH HIGH
BACTERICIDAL POWER

**DOES NOT STING
PLEASANTLY SCENTED**

To disinfect closed locals, outpatient clinics, dentist surgeries, sanitary fittings and surfaces leaving a pleasant scent.

INSTRUCTION FOR USAGE: For the disinfection of standard size premises do not spray for more than 3 or 4 seconds. Repeat the treatment only when necessary and directing the jet upwards. Before the treatment, clean thoroughly all the surfaces, then spray the product evenly and let the product work for at least 10 minutes.

CAUTIONS: Do not inhale directly the jet and do not spray in the directions of eyes. The product must not contaminate food, beverages or containers. Keep the product away from children and pets. Container under pressure. Keep away from the sun light and do not expose to a temperature higher than 50°C. Do not pierce or burn even after usage. Do not spray on flames or burning objects. Do not smoke during usage. Do not use in too great quantities. Do not use along with other products. **Do not use on injured skin or mucous. DOES NOT STAIN - DOES NOT CONTAIN PROPELLERS HARMFUL FOR THE OZONE.**

COMPOSITION: 100 g. contain: O-phenilphenol mg.20, alkyl-benzyl-oleil-ammonium chloride mg.100, Essential oils composition: isopropyl alcohol, propellers and other ingredients as much as will suffice to 100 g.

Reg. Min. Healt n. 7604
Batch number and expiry,
see under the bottle.



GERMO S.p.A. - Cormano (MI)
Officina Conf. PHARMAC ITALIA S.r.l. - Rozzano (MI)

Volume netto 400 ml Peso netto 245 g 520 3 e

