



GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has 2-YEAR warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



MORETTI

**CERTIFICATO DI GARANZIA
WARRANTY CERTIFICATE**



MOPEDIA

PRODOTTO / PRODUCT _____

ACQUISTATO IN DATA / PURCHASING DATE _____

RIVENDITORE / AUTHORIZED DEALER _____

VIA / STREET LOCALITÀ / PLACE _____

VENDUTO A / SOLD TO _____

VIA / STREET LOCALITÀ / PLACE _____

MORETTI S.P.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com
Made in Taiwan

MA RS970/xx_972/xx 01 A_Marzo 2011



MOPEDIA



MANIGLIONE DA MURO IN PLASTICA MANUALE D'ISTRUZIONI

BATH HANDLE INSTRUCTION MANUAL



MORETTI

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com



Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva 93/42 CEE
e successive modifiche

Codici

RS970/30 Ø 32 mm lunghezza 30 cm

RS970/45 Ø 32 mm lunghezza 45 cm

RS970/60 Ø 32 mm lunghezza 60 cm

RS972/30 Ø 36 mm lunghezza 30 cm

RS972/45 Ø 36 mm lunghezza 45 cm

RS972/60 Ø 36 mm lunghezza 60 cm

Introduzione

Grazie per aver scelto un maniglione da muro in plastica della linea MOPEDIA by Moretti. I maniglioni da muro della linea MOPEDIA by Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il maniglione da muro. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Destinazione d'uso

Il maniglione da muro della linea MOPEDIA by Moretti è un ausilio per la zona bagno destinato ad aiutare le persone con difficoltà motorie.

Dichiarazione di conformità CE

La Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facenti parte della famiglia maniglioni da muro in plastica sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE del 14 Giugno 1993 riguardante i dispositivi medici.

A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
7. MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

Montaggio

- Scegliere un muro sufficientemente solido e sicuro dove poter installare il maniglione.
 - Assicurarsi che sia possibile praticare dei fori nel muro in totale sicurezza per persone e cose.
 - Assicurarsi di posizionare il maniglione ad una distanza tale da terra in modo che possa essere effettivamente di aiuto per la persona che lo dovrà utilizzare.
 - Sollevare il copri flangia in modo da scoprire il supporto con i fori.
 - Appoggiare la maniglia al muro nella posizione richiesta e marcare il punto in cui si trovano i fori.
 - Togliere il maniglione e praticare i fori nel muro posizionando i tasselli della giusta dimensione.
 - Riposizionare il maniglione sopra ai fori avvitando le viti (si raccomanda di usare viti in acciaio diametro 5mm x 50 mm di lunghezza con la testa svasata).
 - Stringere bene le viti.
 - Infine, coprire la flangia con l'apposito copri flangia. Questo darà alla maniglia un aspetto più elegante e coprirà le viti.
- N.B.** Si raccomanda l'uso di viti d'acciaio inox oppure zincate, si riduce così la comparsa di ruggine.

Avvertenze per l'utilizzo

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.

Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

Modalità d'uso

Il maniglione disposto in orizzontale diventa un efficace punto di appoggio per aiutarsi nei movimenti ed anche per sedersi e rialzarsi dal wc.

Attenzione! NON GRAVARE MAI SUL MANIGLIONE CON TUTTO IL PESO DEL CORPO, MA UTILIZZARLO SEMPLICEMENTE PER MANTENERE IL GIUSTO EQUILIBRIO E PER RIDURRE LO SFORZO NECESSARIO AL MOVIMENTO.

Manutenzione

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Prima di ogni utilizzo assicurarsi sempre del corretto fissaggio delle viti al muro.

Pulizia

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente acqua tiepida con detersivi neutri.

Avvertenze Generali

E' vietato l'utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.


La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

Caratteristiche tecniche

MATERIALE: il tubo è realizzato in PVC estruso e le parti terminali in plastica stampato a iniezione

Dimensioni

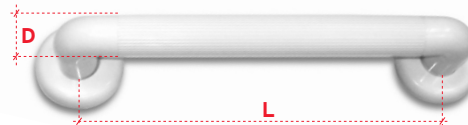

D = diametro

L = lunghezza

RS970/30

diametro 32 mm lunghezza 30 cm

RS970/45

diametro 32 mm lunghezza 45 cm

RS970/60

diametro 32 mm lunghezza 60 cm

RS972/30

diametro 36 mm lunghezza 30 cm

RS972/45

diametro 36 mm lunghezza 45 cm

RS972/60

diametro 36 mm lunghezza 60 cm

Class Medical Device according to EEC directive 93/42 & subsequent amendments

Codes

RS970/30	Ø 32 mm length 30 cm
RS970/45	Ø 32 mm length 45 cm
RS970/60	Ø 32 mm length 60 cm
RS972/30	Ø 36 mm length 30 cm
RS972/45	Ø 36 mm length 45 cm
RS972/60	Ø 36 mm length 60 cm

Introduction

Thank you for choosing a MOPEDIA plastic safety bath handles from the MOPEDIA by MORETTI S.p.A. product range. The design and quality of these products is a guarantee of comfort, safety and reliability. MOPEDIA by MORETTI S.p.A. plastic safety bath handles are designed and built to meet all your demands for practical, correct use. This user's manual provides some suggestions as to how to correctly use the bath handles you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the plastic safety bath handles. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

Intended use

The MOPEDIA safety bath handle by Moretti is a bathroom aid for people with motor difficulty.

EC Declaration of conformity

MORETTI S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by MORETTI S.p.A. and belonging to the PLASTIC SAFETY BATH HANDLES category are compliant with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC. To this end MORETTI S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of

directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the said directive.

2. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT TOOLS.
3. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
4. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
5. The devices in question should be considered as belonging to class I.
6. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by MORETTI S.p.A.
7. MORETTI S.p.A maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities.

Assembling

- Choose a solid and safe wall to install the handle.
- Make sure that it is possible to drill the wall safely for people and things.
- Make sure to position the handle bar at the most suitable height for users.
- Lift the flange cover to show the hole screw.
- Offer the handle up to the wall in the desired position and mark the screw hole position.
- Drill the wall and push correct sized plugs for the screw you are using into the wall.
- Offer the handle up to the wall, and drive the screws (we recommend using stainless steel countersunk screws 5x50mm).
- Tighten well the screws.
- Finally, clip the screw cover over the flanges. This will give to your handle an elegant appearance and hide the screw head.

NOTE STAINLESS STEEL SCREWS ARE RECOMMENDED TO REDUCE THE RISK OF RUST

**Warning**

For a correct use please make reference to the following manual.
Pay attention to the presence of children.

Directions for use

The safety bath handle if horizontally placed becomes an efficient foothold for movement such as sit or stand up from wc.

Caution! DON'T BEAR DOWN ON THE HANDLE WITH WHOLE BODY WEIGHT, JUST USE THE HANDLE AS SUPPORT FOR MOVEMENT.

Maintenance

The MOPEDIA by Moretti devices are carefully checked before the marketing and provided of CE mark. Before every use make sure the bath handle is correctly fixed to the wall.

Cleaning


We recommend to use only warm water with mild soap.

General warnings

Do not use the product for a purpose not indicated in this manual. Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product. The manufacturer can modify the device or the instruction manual without prior notification.

Technical features

MATERIAL: the grab is composed by extruded PVC and strong ABS injection moulded plastic for the end parts.

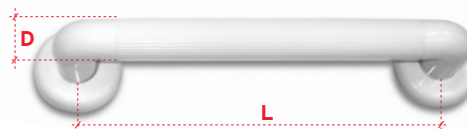Dimension

D = diameter

L = length

RS970/30

diameter 32 mm, length 30cm

RS970/45

diameter 32 mm, length 45cm

RS970/60

diameter 32 mm, length 60cm

RS972/30

diameter 36 mm, length 30cm

RS972/45

diameter 36 mm, length 45cm

RS972/60

diameter 36 mm, length 60cm

