

GARANZIA

Il reggibraccio con immobilizzatore è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare il reggibraccio munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This arm sling with immobilizer has **2-YEAR** warranty from the purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In case you need to get your cotton arm sling repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____


Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.
INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com
MADE in TAIWAN

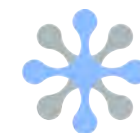

MOPEDIA



A 9 0 6 9 8 6 0 9 4

RP175

**REGGIBRACCIO COMPLETO DI IMMOBILIZZATORE
MANUALE D'ISTRUZIONI**

**ARM SLING WITH IMMOBILIZER
INSTRUCTION MANUAL**



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RP175

Grazie per aver acquistato il reggibraccio con immobilizzatore **MOPEDIA** by Moretti, adatto per l'utilizzo con gesso o a seguito di distorsioni. Realizzato con bordo rinforzato e sistema di regolazione mediante fibbia in metallo.

Disponibile in un'unica misura.

Uso

Appoggiare il braccio all'interno della fascia, regolare tramite i lacci di chiusura del dispositivo stesso assicurando l'immobilità del braccio.

Lavaggio

 Lavare a mano, temperatura max. 40°C, strofinare delicatamente.

 Risciacquare molto delicatamente, non strizzare.

 Non usare prodotti a base di cloro.

 Non stirare.

 Asciugare su superficie piana (disteso).

I class medical device
according to ECC directive 93/42

Code RP175

Thank you for purchasing the arm sling **MOPEDIA** by Moretti, suitable to be used with plaster or after sprain. Realised in cotton with reinforced border, adjustable regulation system through metal buckle.

Available in one size.

Use

Put your arm inside the cotton sling, adjust the regulation to immobilize the arm.

Washing

 Hand Wash: Garment may be laundered through the use of water.

 Detergent or soap and gentle hand manipulation. Max temperature 40°C.

 Do not bleach: no bleach product may be used.

 Do not iron.

 Dry flat: lay out horizontally for drying.