

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has 2-YEAR warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



MORETTI

CERTIFICATO DI GARANZIA WARRANTY CERTIFICATE



EASYRED

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Sold to _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.P.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

Made in P.R.C.

MA EM250 01 A



EASYRED

EM250

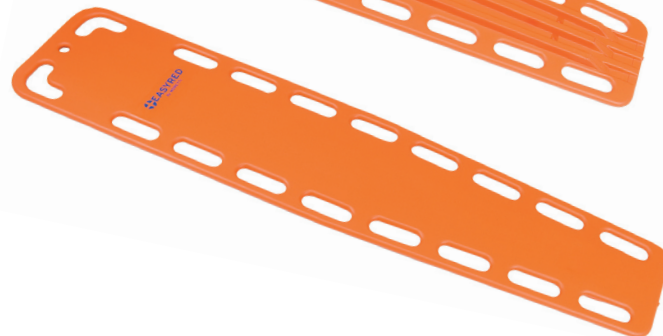


TAVOLA SPINALE MANUALE D'ISTRUZIONI

SPINAL BOARD INSTRUCTION MANUAL



MORETTI

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I

D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

I Class Medical Device

according EEC directive 93/42

Codice EM250

Grazie per aver acquistato la tavola spinale **EASYRED** by Moretti. Costruita in PE ad alta densità, rinforzata con due barre in fibra di carbonio per consentire una maggiore resistenza. Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Destinazione d'uso

Dispositivo di soccorso adatto anche per il soccorso in acqua.

Caratteristiche tecniche

Misure: 183x42x4,4cm

Peso: 6,1kg

Portata massima: 275kg

Istruzioni

- 1) Posizionare la tavola spinale nella maniera desiderata.
- 2) Adagiare attentamente il paziente sulla tavola.
- 3) Bloccare il paziente con le 2 cinture standard in dotazione (o con cintura a ragno).
- 4) Molteplici maniglie al bordo della tavola, permettono di trasportare la tavola da qualsiasi angolatura, dopo essersi assicurati della completa immobilizzazione del paziente.

Avvertenze

- 1) Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato
- 2) Non utilizzare il prodotto diversamente da quanto riportato nel presente manuale.
- 3) La Moretti Spa non si ritiene responsabile per un uso diverso da quello indicato o per un destinazione d'uso differente da quella riportata.

Manutenzione e pulizia

Per la pulizia, utilizzare acqua e un disinfettante non aggressivo; asciugare lontano dalla luce diretta del sole.

Code EM250

Thank you for purchasing the **EASYRED** by Moretti spinal board. Made of High density PE, it is reinforced with 2 carbon fiber bars, in order to support heavy weight.

Intended use

Device for conventional or for water rescue.

Technical features

Size: 183x42x4,4cm

Weight: 6,1kg

Loading capacity: 275kg

Instructions

- 1) Place the spinal board near to the patient
- 2) transfer carefully the patient on the spinal board
- 3) immobilize the patient using the standard belts or the spider straps
- 4) it is possible to move the spinal board from different angles, thanks to lots of handles

Warning

- 1) Only qualified personnel can use this product and can assist the injured person; pay attention, above all, in case of spinal lesions.
- 2) Do not use this product for purposes not indicated in this manual.
- 3) Moretti SpA is not responsible for purposes not indicated in this manual.

Cleaning

Use water and non aggressive disinfectant; dry far from sun rays.