

LETTINI VISITA ECONOMICI

44450 – LETTINO ECONOMICO VERNICIATO NERO

44451 – LETTINO ECONOMICO VERNICIATO BIANCO

44455 – LETTINO ECONOMICO CROMATO BLU

44456 – LETTINO ECONOMICO CROMATO BEIGE

(Prodotti conforme Direttiva 2007/47/EC DISPOSITIVI MEDICI CLASSE I)

MANUALE D'USO e SCHEDE TECNICHE

INTRODUZIONE

Il Lettino Economico da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura; particolarmente adatto a studio medico / ambulatorio.

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. "Scrosati Arredamenti Metallici s.r.l." è regolarmente registrata come fabbricante di dispositivi medici di Classe I presso il Ministro della Salute.

Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni.

Componenti

- N.2 Gambe
- N.1 traverso con alza schienale
- N.5 traversi
- Imbottitura schienale
- Imbottitura seduta

ISTRUZIONI

Il lettino si fornisce completamente smontato

1. Prendere le 2 Gambe e iniziare a fissare i traversi, compreso il traverso con alza schienale, attraverso bulloni.
2. Per ultimo fissare le imbottiture al telaio attraverso viti.

Scheda tecnica (italiano/inglese)

2016	44450 - LETTINO VISITA ECONOMICO NERO 44451 - LETTINO VISITA ECONOMICO BIANCO 44455 - LETTINO VISITA ECONOMICO BLU 44456 - LETTINO VISITA ECONOMICO BEIGE	
DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO	Lettino visita di dimensioni contenute, studiato per studio medico/ambulatorio. Il materassino è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni.	
DESCRIZIONE SINGOLI PARTICOLARI	Struttura e particolari in metallo	<ul style="list-style-type: none"> - Struttura in tubolare acciaio ricavato da nastro a freddo dimensioni mm. 30x1,5 - Telaio cromato oppure verniciato con polvere epossidica colore bianco ral 9010
	Pannelli testa/piedi	//
	Tessuto ed Imbottitura	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 61x50 - 61x130 - Imbottitura composta da truciolare mm. h.14 e gomma mm. h.40 - Materiale lavabile LEDERFLEX GAZEBO/AE (Composizione: 87%PVC – 13% CO) in CLASSE 1 - Colori disponibili: Nero 991, Bianco 9010, Blu 4915, Beige 151
	Ruote	//
	Misure	cm.180 x 61 x h75
	Peso	- 29 kg
	Portata massima	90/100 kg
	Norme di Pulizia (Tessuti)	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
	Note	colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o modifiche

COMMERCIAL NAME	44450 – ECONOMIC EXAMINATION COUCH BLACK COLOR 44451 – ECONOMIC EXAMINATION COUCH WHITE COLOR 44455 – ECONOMIC EXAMINATION COUCH BLUE COLOR 44456 – ECONOMIC EXAMINATION COUCH BEIGE COLOR	
GENERAL DESCRIPTION OF PRODUCT	Examination couch designed for medical office / clinic. The mattress is composed of two parts, a first fixed part, a second part of reclining positions.	
SPECIAL DESCRIPTION SINGLE	Framework	<ul style="list-style-type: none"> - Framework steel tubular got from cold band dimensions 30x1.5. - Frame chromium-plated or white painted ral 9010
	Head/footboard	//
	Upholstery	<ul style="list-style-type: none"> - Dimension 61x50, 61x130. - Upholstery made with wood panel mm. h14 and foam rubber mm. h40. - Simulated leather LEDERFLEX GAZEBO/AE (composition 87% PVC, 13% CO), washable, CLASS 1, - Available colors: Black 991, White 9010, Blue 4915, Beige 151
	Wheels	//
	Measurement	cm.180 x 61 x h75
	Weight	- 29 kg
	Max Capacity	90/100 kg
	Cleaning Rules (Coating)	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.
	Note	colours and characteristics can be changed for improvements and/or alterations

Avvertenza d'Uso


- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- **Quando si regola l'altezza dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: rischio di schiacciamento**
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.
- Vietato l'uso in ambienti aperti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Verificare che i dadi del bloccaggio gambe siano ben stretti.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Pulire il materassino con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
- Pulire il lettino senza utilizzare prodotti abrasivi. Asciugare con cura.
- Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo ricambi originali.

GARANZIA

- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.

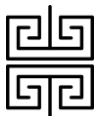

Scrosati arredamenti metallici s.r.l.

Arredamenti e Lavorazioni di tubo e lamiera
Via Vittorio Veneto 95 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)

TEL. 0331668615 - FAX 0331301120

Partita iva e C.F.: 02223730124

Sito web www.scrosati.com

e-mail scrosati@scrosati.com



Certificato ISO 9001:2008 No.07241A