

**Nome Prodotto**

Compressore Prestige.

Destinazione d'uso

Il compressore Prestige viene abbinato con: materasso a bolle d'aria BP2 (cod. 05.03.BP2), materasso a bolle d'aria BP4 (cod. 05.03.BP4) e con il materasso ad elementi Supercare T01 (cod. 05.03.T01). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.6600A4
Dimensioni	24 x 11.5 x 9 cm
Scocca	ABS Ignifugo
Modalità di Erogazione dell'Aria	Alternata (A-b-A-b)
Portata	7 LPM
Campo di Pressione	Da 50 a 120 mm Hg
Rumorosità	≤ 20 Dba
Minuti per Ciclo	12 min
Alimentazione	220/240 V – 50 Hz
Consumo	7 Watt
Lunghezza Cavo Elettrico	3 m
Peso	0.8 Kg
Fusibile	1.5 A
Altro	Due Ganci in Acciaio per l'Ancoraggio al Letto

Avvertenze

Il compressore può essere utilizzato solo con i materassi consigliati dal fabbricante

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e materasso

Manutenzione e Pulizia

Pulire il compressore con un panno umido e detergente neutro

ATTENZIONE: non immergere mai il compressore in alcun tipo di liquido

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola 1 Pezzo

Garanzia

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto


Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.018
Codice CND	Y033306
Codice RDM	1522221/R

**Product Name**

Prestige Pump.

Use

The Prestige pump has to be combined with: bubble air mattress BP2 (code 05.03.BP2), bubble air mattress BP4 (code 05.03.BP4) and Supercare mattress T01 (code 05.03.T01). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.

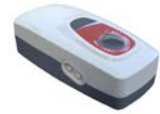

Features	
Code	05.03.6600A4
Dimensions	24 x 11.5 x 9 cm
Case	Fire Retardant ABS
Air Mode	Alternate (A-b-A-b)
Air Output	7 LPM
Pressure Range	50 to 120 mm Hg
Noise Level	≤20 Dba
Cycle Time	12 min
Power	220/240 V-50 Hz
Power Consumption	7 Watt
Electric Cable Length	3 m
Weight	0.8 Kg
Fuse	1.5 A
Other Features	Two steel hooks for anchoring to the bed
Warnings	
The pump can be used only with mattresses recommended by the manufacturer	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the mattress	
Maintenance and Cleaning	
Clean the pump with a damp cloth and neutral detergent	
WARNING: never immerse the compressor in any type of liquid	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	1522221/R