



MANUALE D'USO

CINTURA PELVICO ADDOMINALE



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Demarta Virginio. I prodotti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le Vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'articolo da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

AVVERTENZE GENERALI

1. Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate da questo manuale. Se persistono dubbi contattare la DEMARTA VIRGINIO S.r.l.
2. Valutare sempre la compatibilità del prodotto con le caratteristiche del soggetto insieme al medico curante o al terapeuta.
3. Verificare sempre l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo, anche da nuovo. Non utilizzare se danneggiato o usurato.
4. La DEMARTA VIRGINIO S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti un utilizzo improprio, non concordato con una figura professionale, non corrispondente a quanto indicato sul manuale d'uso.
5. Eventuali incidenti, anomalie, rotture, vanno segnalate alla DEMARTA VIRGINIO S.r.l. al fine di monitorare la qualità e le criticità del prodotto.
6. Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
7. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
8. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La DEMARTA VIRGINIO S.r.l. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa DEMARTA VIRGINIO S.r.l. è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici.

A tal scopo la DEMARTA VIRGINIO S.r.l. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

- I dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
- I dispositivi NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
- I dispositivi NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
- I dispositivi vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
- I dispositivi sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.

DESTINAZIONE D'USO

La Cintura Pelvico Addominale ADIGGY Imbottita e Traspirante offre un comodo fissaggio del paziente alla carrozzina fornendo un'adeguata stabilità del tronco. Previene lo slittamento e lo spostamento laterale.

AVVERTENZE SPECIFICHE

- I sistemi di contenzione devono essere usati da personale sanitario qualificato. Se usati a domicilio è necessario chiedere consiglio al proprio medico o terapeuta.
- Pazienti con contenzioni richiedono un frequente monitoraggio.

DESCRIZIONE

- Tessuto in poliestere traspirante e imbottito che offre un grande confort.
- Costituito da una cintura addominale.
- Design ergonomico che si adatta a qualsiasi morfologia.
- Sistema di regolazione e chiusura tramite fibbie sul davanti che permette un rapido posizionamento.

MONTAGGIO



WATCH ME!

SISTEMA DI CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA



Per aprire il sistema di chiusura con clips in plastica premere verso l'interno su ciascun lato per rilasciare la chiusura. Per agganciare, inserire le due parti insieme e applicando una leggera pressione.

DATI TECNICI

Codice	Taglia
01.12.AD10	Universale

Materiali	
Cintura	Poliestere
Fibbie	Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

GARANZIA

Tutti i prodotti Demarta sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. Demarta non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.



USER MANUAL ABDOMINAL PELVIC BELT



INTRODUCTION

Thank you for choosing Demarta Virginio. The products have been designed and manufactured to meet all your needs for practical, correct and safe use. This manual contains small tips for the correct use of the device of your choice and valuable advice for your safety. We recommend that you read this manual carefully before using the item you have purchased. If you have any doubts, please contact your dealer, who will be able to help and advise you correctly.

The manufacturer reserves the right to make changes to the device and the following manual without prior notice in order to improve its features.

GENERAL WARNINGS

- Use the product in the manner indicated in this manual. If doubts persist, contact DEMARTA VIRGINIO S.r.l.
- Always evaluate the compatibility of the product with the characteristics of the subject together with the treating physician or therapist.
- Always check the integrity of the product before each use, even when new. Do not use if damaged or worn.
- DEMARTA VIRGINIO S.r.l declines any responsibility for damage to property or people resulting from improper use, not agreed with a professional figure, which does not correspond to what is indicated in the user manual.
- Any accidents, anomalies, breakages, must be reported to DEMARTA VIRGINIO S.r.l in order to monitor the quality and criticalities of the product.
- Keep the packaged product away from any heat source as the packaging is made of cardboard.
- Always pay attention to the presence of children.
- The product has been designed for its intended use only. Do not abuse it in any way.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

DEMARTA VIRGINIO S.r.l declares under its sole responsibility that the product manufactured and placed on the market by DEMARTA VIRGINIO S.r.l complies with the applicable provisions of EU Directive 2017/745 on medical devices.

To this end, DEMARTA VIRGINIO S.r.l guarantees and declares under its sole responsibility the following:

- The devices meet the general safety and performance requirements as required by Annex I to Regulation 2017/745 as prescribed by Annex IV to that Regulation.
- The devices are NOT MEASURING INSTRUMENTS.
- The devices are NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
- The devices are marketed in NON-STERILE packaging.
- The devices are to be considered as belonging to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the aforementioned regulation.

INTENDED USE

ADIGGY Abdominal Pelvic Belt offers a comfortable attachment of the patient to the wheelchair providing adequate stability of the trunk. Prevents slippage and sideways shifting.

SPECIFIC WARNINGS

- Restraints should be used by qualified healthcare professionals. If used at home, you should seek advice from your doctor or therapist.
- Patients with restraints require frequent monitoring.

DESCRIPTION


- Breathable and padded polyester fabric that offers great comfort.
- Consisting of an abdominal belt.
- Ergonomic design that adapts to any morphology.
- Adjustment and closure system by buckles on the front that allows quick positioning.

ASSEMBLY



WATCH ME!

CLOSURE SYSTEM WITH PLASTIC CLIPS

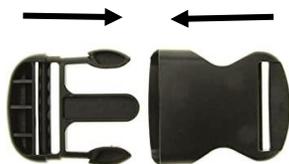

To open the plastic clip latch system, press inward on each side to release the latch. To engage, insert the two parts together and apply light pressure.

TECHNICAL DATA

Code	Size
01.12.AD10	Universal

Materials	
Waist	Polyester
Buckles	Plastic
Manutenzione e Pulizia	
	Max wash 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not use the dryer

GENERAL DISPOSAL CONDITIONS



In case of disposal of the device, never use the normal systems for the disposal of solid urban waste. It is recommended to dispose of the device through the common municipal ecological islands for the foreseen recycling operations of the materials used.

WARRANTY

All Demarta products are guaranteed against defects in materials or workmanship for a period of 2 (two) years from the date of sale of the product, except for any exclusions and limitations specified below. This warranty is not valid in the event of misuse, abuse or modification of the product and for failure to adhere to the instructions for use. Demarta does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disasters, failure to adhere to the guidelines and instructions for use, or failure to perform maintenance as indicated in the manual.

Wearable components are not covered by this warranty if the damage is attributable to normal use of the product.