

GARANZIA

Il prodotto è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has **2-year** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____


Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.
INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com
MADE in P.R.C.

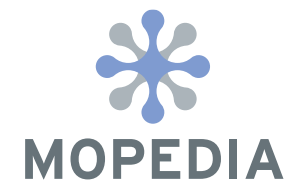

• RS921



• RS922

SEDILI PER VASCA DA BAGNO IN LEGNO MANUALE D'ISTRUZIONI

WOOD BATH CHAIRS INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meieto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I

D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RS921-RS922**Caratteristiche**

Grazie per aver acquistato il sedile da vasca **MOPEDIA** by Moretti, fabbricato secondo i più alti standard di qualità e sicurezza.

Montaggio

- Inserire i due braccioli "C" nel telaio.
- Inserire nel telaio i distanziatori in plastica per mantenere il sedile nella posizione più larga.
- Applicare gli 8 paracolpi in plastica "B" per proteggere i bordi della vasca.
- Inserire lo schienale "D" negli appositi spazi (solo per RS922).

Pulizia

Per la pulizia utilizzare un panno umido ed un normale detergente per ambienti.

Si raccomanda di non immergere completamente il sedile in acqua.

Far scolare l'acqua dopo ogni utilizzo ed asciugare accuratamente le parti.


Avvertenze

Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg.

Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

- Verificare che il prodotto vi sia stato consegnato in perfetto stato prima di usarlo.
- In caso di dubbi sull'utilizzazione, la regolazione o la manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.
- I pezzi usurati, danneggiati o mancanti dovranno essere sostituiti.
- Non conservare il prodotto all'esterno.
- Verificare periodicamente la stabilità del prodotto.

Adatto per vasche dai 53 ai 67 cm.

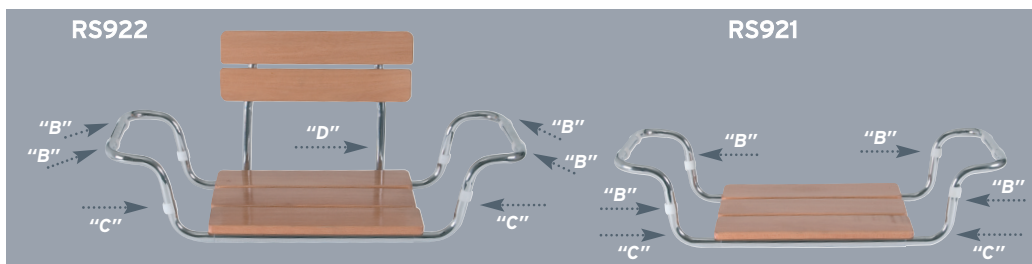

Medical Device Class I

Directive 93/42 EEC

Codes RS921-RS922**Technical features**

Thank you for purchasing our bath chairs **MOPEDIA** by Moretti, which have been manufactured according to the highest quality and safety standards.

Assembly instructions

- Slide armrests "C" in the frame.
- Use the plastic spacers to use the chair on baths 67 cm width.
- 8 plastic clips "B" are provided to protect the sides of the bath.
- Insert the backrest "D" in the frame as illustrated (only for RS922).

Cleaning

Use a damp cloth and a normal detergent. We recommend not to submerge the seat in the bath water, drain the seat tubes after use and dry the seat thoroughly.

Warning

This product is recommended for people weighting 100 Kg. maximum.

The manufacturer and distributor decline all responsibility for any consequences resulting from an incorrect use of this product.

- Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.
- If you have any doubts about the use, adjustment or maintenance of the product, please contact your dealer.
- Worn, damaged or missing components must be replaced.
- Do not store the product outdoors.
- Periodically check the stability of the product.

To fit baths from 53 to 67 inside bath measurement.

