

SEDIA


NEST

SEDIA ELEVABILE

RIF:

821159.TESSUTO

821159.PELLE

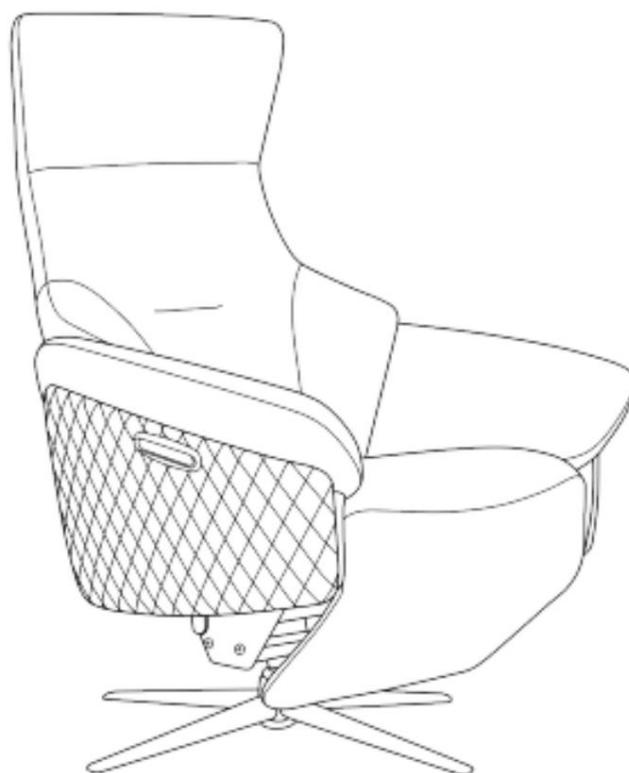

MANUALE D'USO

MANUALE D'USO

INTRODUZIONE :

Questo documento è la traduzione francese del manuale utente fornito da BENELAND.

Si prega di leggere attentamente il manuale utente per un utilizzo ottimale.

Questo manuale deve essere tenuto a disposizione per usi futuri dopo la prima lettura.

SOMMARIO :

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
2. METODO DI INSTALLAZIONE,
3. AMBIENTE D'USO E METODO DI APPLICAZIONE
4. PROCEDURA DI ASSISTENZA/PROCEDURA DI MANUTENZIONE.

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito per evitare danni, scosse elettriche, incendi o altre lesioni.

- Prima dell'uso, leggere attentamente le "Precauzioni di sicurezza" e utilizzare il dispositivo correttamente.
- Le precauzioni indicate di seguito hanno lo scopo di garantire la sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto, per evitare danni o lesioni all'utente e ad altri.
- Utilizzare la sedia per il tempo libero su un pavimento piano. Se hai bisogno di spostare la sedia, lo è si consiglia di farlo sollevare da due adulti, e di non spostarlo spingendo o tirandolo per non graffiare il pavimento, la moquette o usurare il poggiatesta.
- Quando si utilizza un alimentatore, non tirare il cavo di alimentazione, tenerlo lontano dal fuoco, dall'acqua e fuori dalla portata dei bambini e degli anziani. • Spegnere l'interruttore di alimentazione dopo l'uso e conservare il cavo di alimentazione in modo tale per evitare eventuali incidenti di sicurezza causati dai bambini che ci giocano.
- Quando si utilizza una batteria ricaricabile, prestare attenzione all'indicatore della batteria: quando la batteria è completamente carica, si accendono cinque luci blu e quando la batteria è scarica, si accendono tre luci blu.
- Quando la batteria è scarica, si accendono tre o meno luci blu, l'interfaccia USB e L'interfaccia di tipo C non può caricare i telefoni cellulari.
- Se è necessario ritrarre il poggiatesta, è necessario prima esaminare la parte inferiore della sedia per assicurarsi che non ci siano ostacoli, animali o altri oggetti prima di utilizzarla in sicurezza.
- Prima dell'uso, rimuovere la polvere dalla superficie della sedia utilizzando un panno morbido e pulito e mantenerlo sempre pulito.
- Non lasciare che i bambini saltino e giochino da soli sulla sedia o che non possano esprimere le proprie capacità disposto a usarlo da solo, per evitare scosse elettriche e cadute.
- Evitare che apparecchi affilati o coltelli tocchino la superficie della sedia per evitare di graffiare il tessuto.
- Non utilizzare la sedia all'aperto per periodi prolungati. Evitare l'esposizione a luce solare per lungo tempo per evitare sbiadimenti parziali o sbiadimenti del colore del prodotto.
- Tenere la sedia ad almeno 30 cm da fonti di calore. Non utilizzarlo vicino a una fiamma esposti come una stufa o su un radiatore come una coperta elettrica per evitare qualsiasi rischio di incendio.
- Ad eccezione del personale di manutenzione professionale, è vietato smontare, riparare o modificare la sedia a piacimento per evitare malfunzionamenti con conseguenti danni elettrici o incendi.



- Quando si utilizza la spina per ricaricare il prodotto, è vietato inserirla e rimuoverla. staccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si inserisce o si rimuove la spina, è necessario tenere saldamente il corpo della spina.
- È vietato tirare il cavo di alimentazione per evitare danni o scosse elettriche.
Se non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare e conservare il cavo di alimentazione.


2. METODO DI INSTALLAZIONE

Elenco dei componenti:




1. Base poltrona X1
2. Perno X1
3. Sedile X1
4. Cuscino schienale X1
5. Alimentazione X1
6. Batteria X1


Descrizione della procedura di installazione (assemblaggio):

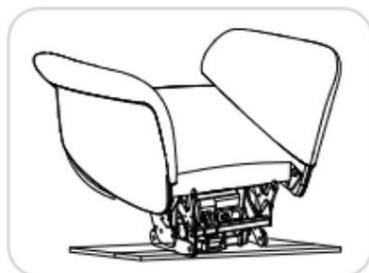

1. Rimuovere il sedile dal cartone, rimuovere le quattro viti dalla piastra inferiore.

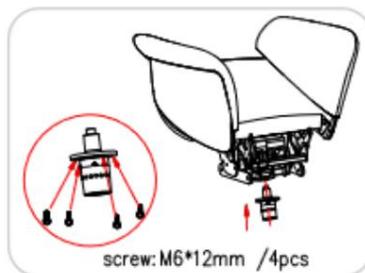


2. Fissare l'albero del perno sulla traversa nella parte inferiore del telaio con le viti (M6*12 mm/4 pezzi).

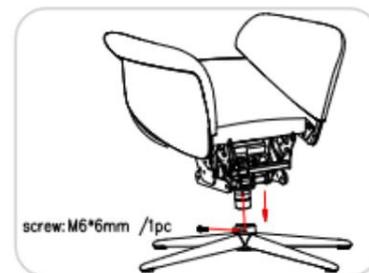

3. Inserire l'albero girevole verticalmente nel foro centrale della base delle gambe, il foro all'esterno della base delle gambe allineato con il foro sul lato dell'albero girevole con le viti (1/ M6*6MM).



4. Allineare i fermi del cuscino dello schienale con il fermo sul sedile e premere con decisione il fermo. L'installazione avrà successo non appena si sentirà il "click".

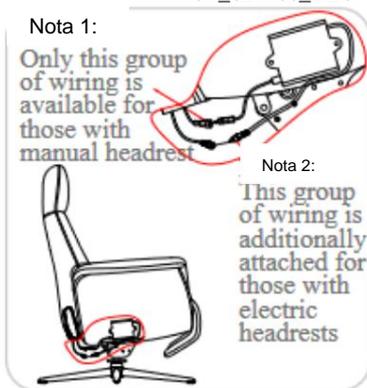

5. Collegare la scatola di controllo con il guinzaglio del cuscino dello schienale.

Nota 1: solo questo gruppo di cablaggio è disponibile per quelli dotati di testina di lettura manuale.

Nota 2: questo gruppo di cablaggio è inoltre fisso per coloro che dispongono di poggiatesta elettrici.




6. Inserire la batteria nella direzione della posizione sulla mappa.
Ruotare di 90 gradi in senso orario per completare l'installazione.

3. AMBIENTE DI UTILIZZO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Ambiente di utilizzo:


Si consiglia di posizionarlo su una superficie piana, con spazio attorno che consenta l'apertura dello schienale e del poggiatesta, per evitare collisioni.

- Quando si abbassa lo schienale o si estende il poggiatesta, per evitare una collisione con gli oggetti circostanti, deve essere lasciato uno spazio superiore a 45 cm davanti e 42 cm dietro essere prenotato in anticipo.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto. Evitare di esporre il dispositivo alla luce solare per lungo tempo per evitare sbiadimenti locali o sbavature dei colori del prodotto e un rapido invecchiamento del tessuto.
- Tenere la sedia ad almeno 30 cm lontano da fonti di calore. Non utilizzarlo vicino a fiamme libere, come fornelli, o su una coperta elettrica per evitare il rischio di incendio.

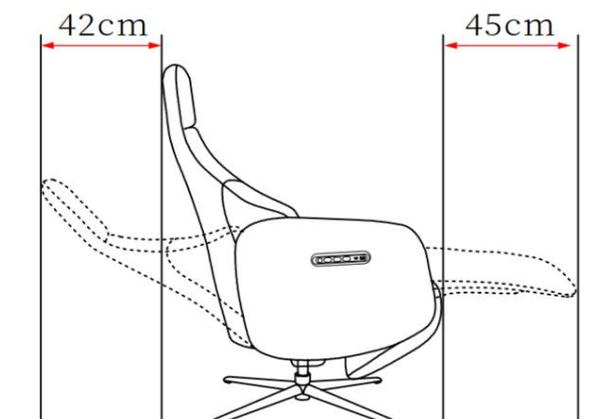

Metodo di applicazione:**• Accendere il dispositivo (metodo di alimentazione)**

Inserire il foro rotondo all'estremità di uscita dell'alimentatore nel foro di uscita rotondo sul retro e inserire la spina nella presa corrispondente (la luce verde si accenderà sulla scatola dell'alimentatore).

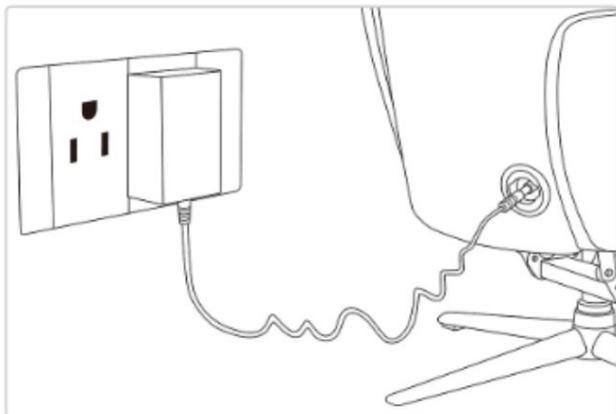**Controllare prima dell'uso:**



Controllare che capelli o polvere non aderiscano alla spina di alimentazione.

Controllare il cavo di alimentazione e la spina per eventuali danni.

Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate per evitare incidenti.

• Accendere il dispositivo (metodo di utilizzo della batteria)

1. Inserire la batteria nella direzione dello slot della scheda.
2. Ruotare di 90 gradi in senso orario per completare l'installazione.
3. Ruotare di 90 gradi in senso antiorario per rimuovere la batteria.

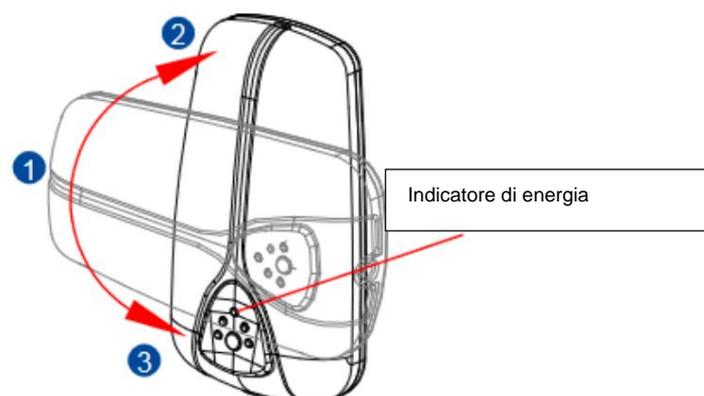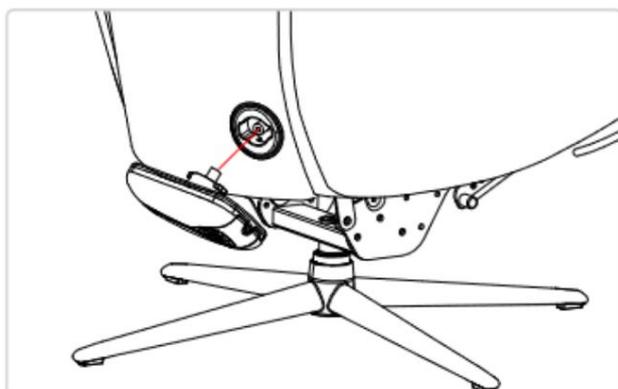**Precauzioni da adottare quando si utilizza la batteria:**

Quando si utilizza una batteria ricaricabile, prestare attenzione all'indicatore di carica

Stato della batteria: quando la batteria è completamente carica, si accendono 5 luci blu.

Quando la batteria è scarica e rimangono tre o meno spie blu,

L'interfaccia USB e l'interfaccia Type-C non saranno in grado di caricare il dispositivo mobile.


• **Metodo di funzionamento del pulsante di commutazione [applicabile alle sedie con la funzione poggiatesta elettrico].**

I pulsanti \ddot{y}/\dot{y} vengono utilizzati per controllare la retrazione/apertura del poggiatesta,

I pulsanti \ddot{y}/\dot{y} vengono utilizzati per controllare il ripristino dello schienale, mentre i pulsanti \dot{y}/\ddot{y} vengono utilizzati per controllare l'apertura/retrazione del poggiapiedi.

I pulsanti \dot{y} vengono utilizzati per controllare l'apertura/retrazione del poggiapiedi.

Il pulsante \dot{y}/\dot{y} è un pulsante di ripristino automatico one-touch (quando si preme questo pulsante, il poggiatesta, il sedile e lo schienale vengono ripristinati, il poggiatesta, il sedile e lo schienale si aprono o si ritraggono contemporaneamente).

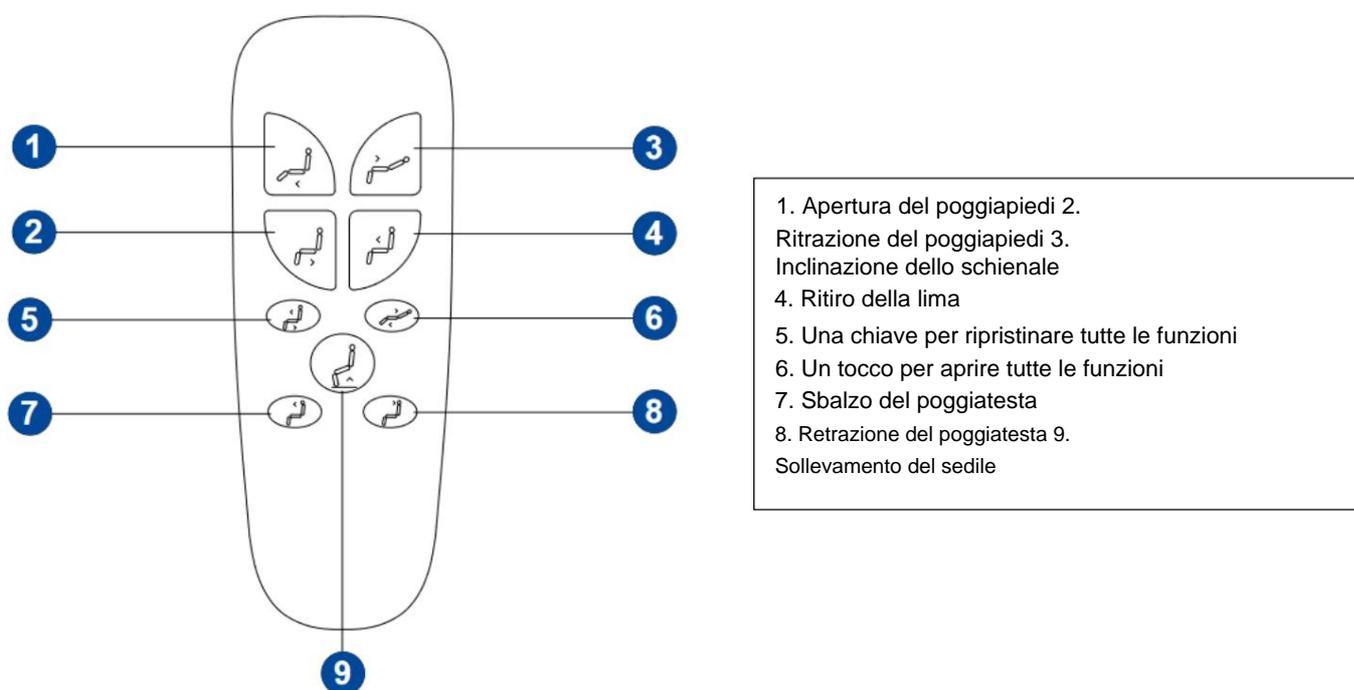

Attenzione:

- Pulire frequentemente la superficie della sedia con un panno morbido e pulito prima dell'uso.
- Insegnare ai bambini a non saltare sul sedile della sedia, per non deformarlo successivamente.
- Evitare che apparecchi affilati o coltelli tocchino la superficie della sedia per evitare di graffiare il tessuto.
- Se è necessario ritrarre il poggiapiedi, controllare innanzitutto sotto la sedia per assicurarsi che non ci siano animali o altri oggetti prima di utilizzarla in sicurezza.

Quando ti muovi, considera quanto segue:

-Se è necessario spostarlo, si consiglia che due adulti sostengano la parte inferiore del bracciolo

sollevare la sedia.

- Non spostare la sedia quando è aperta per evitare di danneggiare le parti della sedia.
- Non spingere, tirare o utilizzare altri mezzi per spostare la sedia per evitare di graffiare il pavimento e il tappeto o di rigare il poggiatesta.
- Non trasportare persone o cose e non permettere ai bambini di maneggiarlo per evitare pericoli.



4. PROCEDURA DI MANUTENZIONE

Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire frequentemente la polvere o le macchie di tessuto.

Lo spazio in cui si incontrano lo schienale, il bracciolo e il sedile può essere pulito utilizzando un aspirapolvere.

Procedura di manutenzione giornaliera:



- Posizionare la sedia in un luogo con temperatura adeguata per evitare che il tessuto si macchi a causa dell'umidità e della polvere ed evitare lo scolorimento e l'invecchiamento del tessuto causato dalla forte luce.
- Assicurarsi di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando si eseguono lavori di manutenzione e fare attenzione a non tirare la spina per rimuoverla. Fare attenzione a non rimuoverlo con le mani bagnate per evitare scosse elettriche e lesioni.
- È vietato utilizzare panni bagnati, oggetti duri o prodotti chimici come acidi o alcalini per toccare il dispositivo.
- È vietato utilizzare un panno umido, oggetti duri o prodotti sulla qualità della superficie e sul ciclo di lavoro.
- Non stirare il tessuto per evitare di danneggiarlo.

Procedura di manutenzione regolare:

In genere, la manutenzione deve essere eseguita una volta al trimestre. Dopo aver pulito la superficie della sedia con un panno morbido e pulito, il tessuto in pelle può essere rivestito uniformemente con uno speciale detergente per pelle o un agente lucidante.

Quando la sedia non viene utilizzata per un lungo periodo, è necessario coprirla con un telo protettivo per evitare che la polvere si depositi sulla superficie della sedia.



- Impedire ai bambini di pugnalarlo con oggetti appuntiti e impedire loro di farlo saltare e giocare sulla sedia per evitare infortuni.
- I bambini dovrebbero evitare di scarabocchiare sulla sedia con penne colorate, pennarelli o polvere colorata e altri agenti inquinanti. Una volta che l'inquinamento è rilevato, dovrebbe essere pulito in tempo.
- I bambini non devono giocare con l'alimentatore, né tirare il cavo di alimentazione e rimuovere solo la batteria.
- Quando si è seduti o sdraiati sul divano, non è consigliabile indossarlo sopra di oggetti duri o prodotti metallici, per evitare di graffiare la superficie e rendere difficile l'utilizzo del divano.