



**SEDIA PER IL TEMPO LIBERO ID MOUV**

***Manuale di istruzioni***

**DISPOSITIVO MEDICO**

**RIF. 875026**



**SIMBOLO FIGURANTE SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION  
SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI  
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**

	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di produzione		Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento al prodotto		Non tollera l'umidità
	Peso massimo dell'utilizzatore		Dispositivo medico

# MANUALE DI ISTRUZIONI

## IT

### IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei ti consiglierà e ti informerà sull'uso più appropriato al tuo caso.

Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

### DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La sedia per il tempo libero ID MOUV è un dispositivo progettato per fornire mobilità in posizione seduta a persone disabili o anziane. La sedia è destinata all'uso interno ed esterno su brevi distanze e si ripiega per essere facilmente riposta o trasportata.

### MISURE DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare il limite massimo di peso di 100 Kg. • Assicurarsi che tutte le parti (ruote, cavi, maniglie, manopole, joystick, ecc...) siano sicure e in buone condizioni.
- Non utilizzare la sedia a rotelle su scale o scale mobili.
- Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.
- Non apportare alcuna modifica alla sedia a rotelle mentre è in uso.
- Controllare che il joystick funzioni correttamente prima dell'uso.
- Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.
- Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.
- Non salire sul poggiatesta poiché ciò potrebbe causare la caduta della sedia a rotelle e dell'utente.
- Quando la carrozzina viene utilizzata su terreni in pendenza: l'utente deve allacciare la cintura di sicurezza.
- Se qualche parte è danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.
- Assicurarsi che l'utente abbia la capacità di utilizzare il prodotto eseguendo un corso

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1	Maniglia del tubo
2	Telecomando da gioco
3	Posto a sedere
4	Telaio anteriore
5	Scatola batteria
6	Poggiatesta
7	Ruota anteriore Ø 15 cm
8	Ruota posteriore Ø 20 cm
9	Ruota antiribaltamento
10	Freno
11	Telaio posteriore
12	Cintura di sicurezza
13	Schienale
14	Bracciolo
15	Pomello di bloccaggio

## MONTAGGIO E UTILIZZO

### MONTAGGIO:

ÿ **Carrozzina aperta:** Tenere lo schienale con una mano e il telaio anteriore con una mano e aprirlo contemporaneamente (come mostrato nelle Figure 1 e 2) fino al pianerottolo sulle quattro ruote e premere lo schienale per agganciare l'interruttore di piegatura in ferro. la boccia del telaio posteriore e la sedia a rotelle si aprono. La sedia a rotelle è aperta (3).



(1)



(2)



(3)

ÿ **Piegatura della sedia a rotelle:** alzare prima i pedali e i braccioli, quindi unire il telaio dell'interruttore di piegatura e premerlo verso il basso lo schienale, la sedia a rotelle può essere facilmente ripiegata.



ÿ **Funzionamento della maniglia:** rilasciare la maniglia della leva di sgancio rapido per regolare l'altezza della maniglia o rimuovere la maniglia, e bloccarlo per risolverlo.




**Operazione di regolazione del telecomando:** rilasciare la maniglia della leva di sgancio rapido per regolare o rimuovere il telecomando.  
Il blocco è fisso.




**Installazione della ruota antiribaltamento:** Installare la ruota antiribaltamento e fissarla con il bullone.



**Cablaggio del telecomando:** il telecomando è installato a destra per impostazione predefinita. Collegare il connettore del cavo di controllo a controller con il connettore corrispondente sulla scatola di controllo e serrare il dado di connessione.

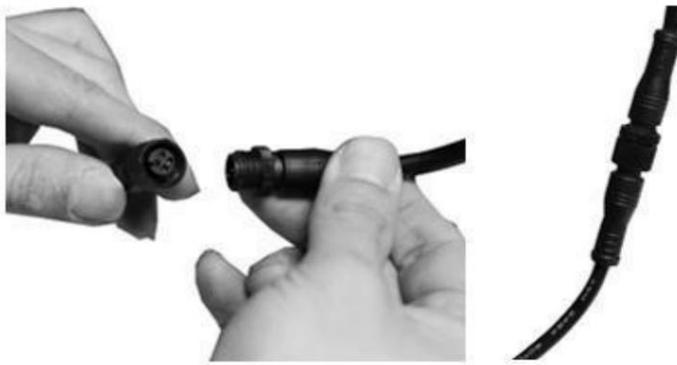

Nell'accoppiare i giunti prestare attenzione alla corrispondenza delle tacche. Le frecce nere sui giunti sinistro e destro devono corrispondere. Non inserirli con forza per evitare danni alle articolazioni.

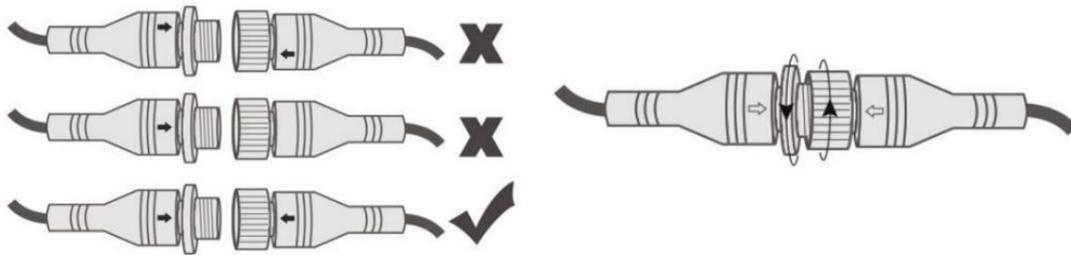

**UTILIZZO :**

- Dopo che l'operatore si è seduto saldamente, accendere l'interruttore di alimentazione **1** del controller, quindi accendere immediatamente la sedia a rotelle. Il sistema imposta una strategia di partenza sicura. Si prega di rilasciare il joystick durante l'avvio, altrimenti il sistema si bloccherà e non si avvierà.
- La velocità di guida della sedia a rotelle viene regolata tramite il pulsante di regolazione della velocità **3** o **7 (+ o -)** sul controller. Ci sono cinque marce. Si consiglia di utilizzare una velocità bassa durante l'avvio. La velocità in tempo reale può essere visualizzata durante la guida e non è possibile cambiare marcia durante la guida. Gli utenti alle prime armi consigliano la guida a bassa velocità; per evitare incidenti dovuti a operazioni non qualificate.
- Iniziare lentamente tirando la maniglia **4**, la maniglia oscillante si sposterà in avanti verso la sedia a rotelle, la maniglia oscillante girerà a sinistra verso la sedia a rotelle, la maniglia oscillante girerà a destra verso la sedia a rotelle e la sedia a rotelle si sposterà all'indietro. Permette alle sedie a rotelle di viaggiare liberamente.
- Se è necessario l'allarme con fischio, premere il pulsante contrassegnato con il simbolo del clacson sul controller **6**.
- Quando la batteria è completamente carica **5**, vengono visualizzati 5 livelli di potenza. Quando l'energia è insufficiente, il livello di potenza è 1 o l'icona di alimentazione lampeggia per indicare che la carica rimanente attuale è insufficiente. Si prega di caricare in tempo per mantenere la potenza sufficiente
- Per spegnere, tenere premuto a lungo l'interruttore di alimentazione **1** e spegnere la sedia a rotelle dopo un messaggio.

**Descrizione della funzione del terminale di controllo remoto:**



<b>1</b>	interruttore di alimentazione
<b>2</b>	marce
<b>3</b>	Riduzione del limite di velocità
<b>4</b>	Telecomando da gioco
<b>5</b>	Indicatore della batteria
<b>6</b>	Corno
<b>7</b>	Aumento del limite di velocità
<b>8</b>	Telecomando da gioco

Il telecomando si accende quando si sente un segnale acustico. Per spegnere il telecomando, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il telecomando si spegne quando si sente un segnale acustico.

#### **Freno elettronico:**

Questa sedia a rotelle elettrica adotta un sistema frenante elettronico. Può essere interrotto immediatamente quando l'utente rilascia la mano. Non spegnere l'alimentazione quando l'utente sta salendo o scendendo lungo la strada. Se vuoi parcheggiare o scendere dall'auto, tira prima il freno. Le sedie a rotelle scivolano automaticamente; premere questo materiale per garantire un utilizzo sicuro. Si consiglia agli utenti di spegnere il controller senza utilizzare una sedia a rotelle per ridurre il consumo energetico.

#### **Freno intelligente a batteria**

**scarica:** la sedia a rotelle elettrica ID Movv può essere utilizzata in modalità elettrica o manuale. La modalità elettrica si attiva automaticamente all'accensione della sedia a rotelle. Per passare alla modalità manuale, spegnere il joystick.

Durante il viaggio, se la batteria della sedia a rotelle è inferiore al 10%, è necessario interrompere il viaggio e ricaricare la batteria.

Passa alla modalità manuale per terminare il tuo viaggio.

*Quando si utilizza la sedia a rotelle su strade accidentate, vi consigliamo di mantenere la modalità manuale per garantire la vostra sicurezza.*

#### **Ricarica:**

Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre il caricabatterie fornito con la sedia a rotelle ID Movv. Collegare la spina di uscita del caricabatterie alla presa di ricarica sul retro del joystick.

Collegare la spina del caricabatterie a una presa a muro adatta alla tensione e alla frequenza del caricabatterie.

Quando l'indicatore di carica sul caricabatterie diventa verde, significa che la potenza è sufficiente.

**La capacità della batteria è di 6Ah. Il tempo di ricarica è di circa 4-5 ore**



Quando ci si alza dalla sedia, non appoggiarsi al poggiatesta per evitare di ribaltare la sedia.

Quando si sale o si scende dalla sedia, bloccare sempre il freno e sollevare il poggiatesta per evitare cadute.




## **CURA E MANUTENZIONE**



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Pulire regolarmente la sedia a rotelle con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o solventi. • Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto. • Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti attorno al asse, freni o ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide. • Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano. • Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Non scambiare i connettori del motore sinistro e destro. Per non causare un collegamento errato (vedi schema).
- Controllare l'attacco del joystick a destra o a sinistra e lo stato dei cavi dalle carcasse delle ruote al joystick (una volta alla settimana)
- Controllare il funzionamento e l'innesco della ruota libera (prima di ogni utilizzo)
- Controllare la batteria (una volta al mese)
- Controllare la piegatura e l'apertura, il prodotto cliccato nella posizione aperta (una volta al mese)
- Controllare la velocità del prodotto (prima di ogni utilizzo)
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli la sedia a rotelle. Consultare un rivenditore autorizzato.

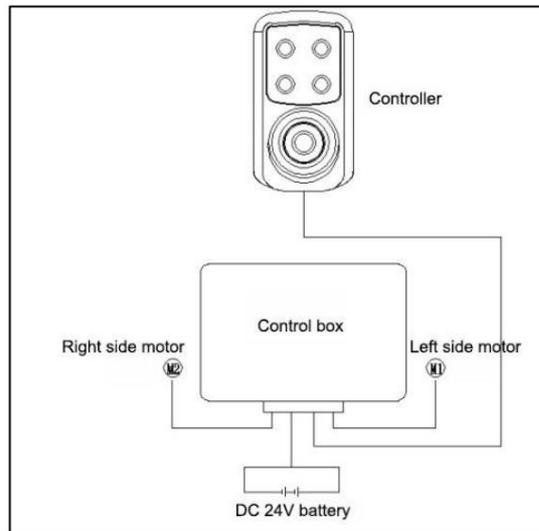

## CAMBIO DI PROPRIETA'

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il tuo prodotto, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

## RACCOLTA DIFFERENZIATA

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgerti al proprio rivenditore specializzato. Se desideri effettuare il riciclaggio per conto tuo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

## MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino ad una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
- Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto). non inceppare nulla...).

## PERIODO DI UTILIZZO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata potrebbe ridursi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Grande. 58 x Prof. 93 x Alt. 97cm
------------------------	-----------------------------------

Dimensioni del sedile	Grande. 42 x Prof. 36 x Alto. 53 cm
Altezza dello schienale	40cm
Larghezza piegata	34cm
Motori	2x CC 24 V 250 W
Autonomia	15 a 20 chilometri
Capacità della batteria	Litio 6 aH
Velocità massima	6 chilometri all'ora
Raggio di sterzata minimo	γ 1200 mm
Prestazioni di frenata	γ 1,5 m
Peso	18 chilogrammi
Peso massimo supportato	100 chilogrammi

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o produzione. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.