

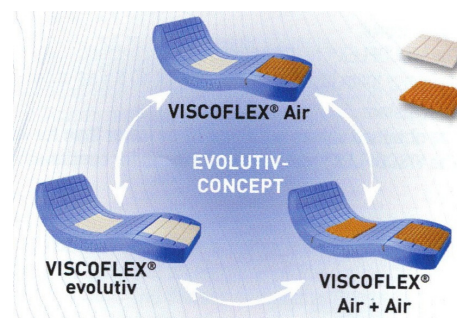


Materassi/Sovramaterassi **Viscoflex** e **Viscoflex linea Evolutiv**

Fabbricante	Distributore
SYSTAM ZAE route de Casseneuil - Le Lédât – 47300 Villeneuve sur Lot France	Movi S.p.A- Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
	


Destinazione d'uso

Indicate per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito.

Descrizione

I materassi Viscoflex sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle Lesioni da Pressione.

Prodotto in polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³), stampato su base in Poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m³), anatomicamente sagomato. Viscoelastico 6 cm di spessore su tutto il materasso ed 8 cm nella zona sacrale, maggior protezione del paziente. Presenta una sezione antiaffondamento nella zona sacrale costituita da un maggiore spessore di polimero viscoelastico (8cm) a protezione della seduta. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio.

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche.

Disponibile in versione Materasso Sostitutivo (MR) o Sovramaterasso (OL).

Modulare, si adatta a tutte le esigenze specifiche. Presenta due

alloggiamenti per inserti. Nella zona talloni e nella zona sacrale. Sono disponibili due tipi di inserti:

- ad altissima densità (80 Kg/m³) a bassa pressione di contatto (inserto bianco) (LP).
- ad aria con sistema nido d'ape, pressioni interne personalizzabili, accessibile con fodera chiusa (inserto arancione)(AIR).

Sono possibili tutte le combinazioni. Inserti interscambibili.

Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile Polymaille[®] che assicura il massimo comfort ed una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante.

Caratteristiche Tecniche

Peso	Materasso: 15,8 kg ; Sovramaterasso:7,8 kg
Densità del polimero viscoelastico	80 Kg/m ³
Densità del poliuretano alta resilienza	40 kg/m ³
Portata terapeutica consigliata:	Viscoflex (MR) →130-270 Kg (OL) → 110 Kg Viscoflex Evolutiv (MR)→130 Kg (OL) → 110 Kg
Stadio EPUAP	II-III-IV (III e IV richiedono osservazione e riposizionamento)
CFC	Completamente assente
Latex free	Completamente latex free

Materiali

Base	Poliuretano
Rivestimento del PU /inserti LP	Polimero viscoelastico alta densità (80 Kg/m ³)
Inserti Polyair zona sacrale/talloni	Laxprene, materiale anallergico
Copertura	Polymaille

Gamma di prodotti

VISCOFLEX

Codice	Descrizione	Dimensioni (L x Lu x A, cm)	Materasso sostitutivo (MR) Sovramaterasso (OL) Inserto bassa pressione (LP) Inserto Polyair (AIR)
P161MOPMHI	Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.14 cm. con copertura Polymaille	90x200xh.14 cm	(MR)
P161MFPMHI	Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.14 cm con copertura Polymaille	90x200xh.14 cm	(MR) Ignifugo

VISCOFLEX EVOLUTIV

Codice	Descrizione	Dimensioni	Materasso sostitutivo (MR) Sovramaterasso (OL) Inserto bassa pressione (LP) Inserto Polyair (AIR)
P161MORPMHI	Materasso Viscoflex Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200xh.14 con copertura Polymaille	90x200xh.14	(MR) + 1LP + 1AIR
P161MFRPMHI	Materasso Viscoflex Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM	90x200xh.14	(MR) + 1LP + 1AIR Ignifugo
P161MOEPMHI	Materasso Viscoflex Evolutiv in materiale viscoelastico con 2 inserti a bassa pressione, 90x200xh.14 con copertura Polymaille	90x200xh.14 cm	(MR) + 2 LP
P161MFEPMHI	Materasso Viscoflex Evolutiv in materiale viscoelastico con 2 inserti a bassa pressione,	90x200xh.14	(MR) + 2 LP Ignifugo

	90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM		
P161MO2RPMHI	Materasso Viscoflex Air+Air in materiale viscoelastico con 2 inserti Polyair, 90x200xh.14 con copertura Polymaille	90x200xh.14 cm	(MR) +2 AIR
P161MSPPMH	Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico con un inserto a bassa pressione 90x200xh.6 cm con copertura polymaille	90x200xh.6 cm	(OL) + 1LP
P161MSPMHI	Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.6 cm con copertura polymaille	90x200xh.6 cm	(OL)
P161MF2RPMHI	Materasso Viscoflex Air+Air in materiale viscoelastico con 2 inserti Polyair, 90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM	90x200xh.14	(MR) +2 AIR Ignifugo

Accessori

Descrizione	Codice
Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutiv	P161MO2
Inserto Polyair per Viscoflex Evolutiv	P301CR51432HW
Telo Polymaille integrale per Viscoflex linea Evolutiv 90x200x14 cm.	P462PM
Telo Polymaille integrale per Viscoflex 90x200x14 cm.	P461PM

Conformità alla direttiva 93/42/CEE Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC

Classe di appartenenza

I

Codice ISO

1. MR: 03.33.06.006

Conservazione

Dispositivo confezionato: 12 mesi

**Pulizia/
decontaminazione/
disinfezione**

Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave.

Pulizia Polymaille: lavare a 95 °C; non usare candeggina; non stirare; pulire a secco con solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugabiancheria.

Confezionamento

Compresso in scatole 40 x 40 x 89 cm (per le misure standard) – una volta aperto lasciare il materasso all'aria per circa 1 ora. Non può essere compresso di nuovo.

**Emissione/Ultimo
aggiornamento**

Data: 18-02-2011