

LETTO ELETTRICO PER DEGENZA**Ref. LT-HB20**

Il colore del letto e la dotazione del materasso, sono puramente indicativi

Descrizione

Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare e rete a 4 sezioni mobili, di colore grigio carbone. Sezione alza-testa e sezione gambe regolabili tramite due attuatori elettrici 24 V DC con telecomando a filo. Sezione piedi con regolazione manuale a cremagliera. Sezione bacino fissa. Altezza variabile del piano rete compresa tra circa 21 cm di altezza minima e 59 cm di altezza massima, regolabile mediante due attuatori elettrici 24 V DC inseriti internamente ai pannelli delle spalliere del letto che permettono inoltre, tramite regolazione separata con comando a filo, la posizione di Trendelenburg fino a 11° e anti-Trendelenburg fino a 11°.

Può essere dotato di sponde dedicate dal design innovativo;

- con apertura laterale per agevolare i trasferimenti, realizzate in alluminio
- a due sezioni per lato, abbassabili separatamente, sempre realizzate in alluminio, particolarmente utili e pratiche durante le assistenze del personale medico/infermieristico.

A richiesta, asta alza malati (Capra) con cinghia e maniglia ed altri accessori compatibili.

Destinazione d'uso

Il letto è adibito esclusivamente alla degenza di persone.

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	V08060101	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2654210/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2024	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbrikante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbrikante	IT-MF-000013039	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997LETTIEACC5L
Codice Ref.	UDI-DI
LT-HB20	8056992231832


Caratteristiche Tecniche

Peso complessivo	93,2 Kg
Portata massima	180 kg
Lunghezza rete	190 cm
Larghezza interna telaio	89,7 cm
Lunghezza totale	216 cm
Lunghezza interna telaio	197,5
Larghezza rete	85 cm
Larghezza totale	104 cm
Altezza della rete dal suolo	da 21 a 59 cm
Inclinazione alza-busto	75°

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Inclinazione alza-gambe	30°
Trendelenburg – Anti-Trendelenburg	±10°
Ruote	Ø 3"
Alimentazione di rete	220 V – 50Hz
Tensione nominale attuatore	24 V
Livello di rumore	<52 dB (A)
Temperatura di utilizzo	Da -5°C a +45°C

Ingombri

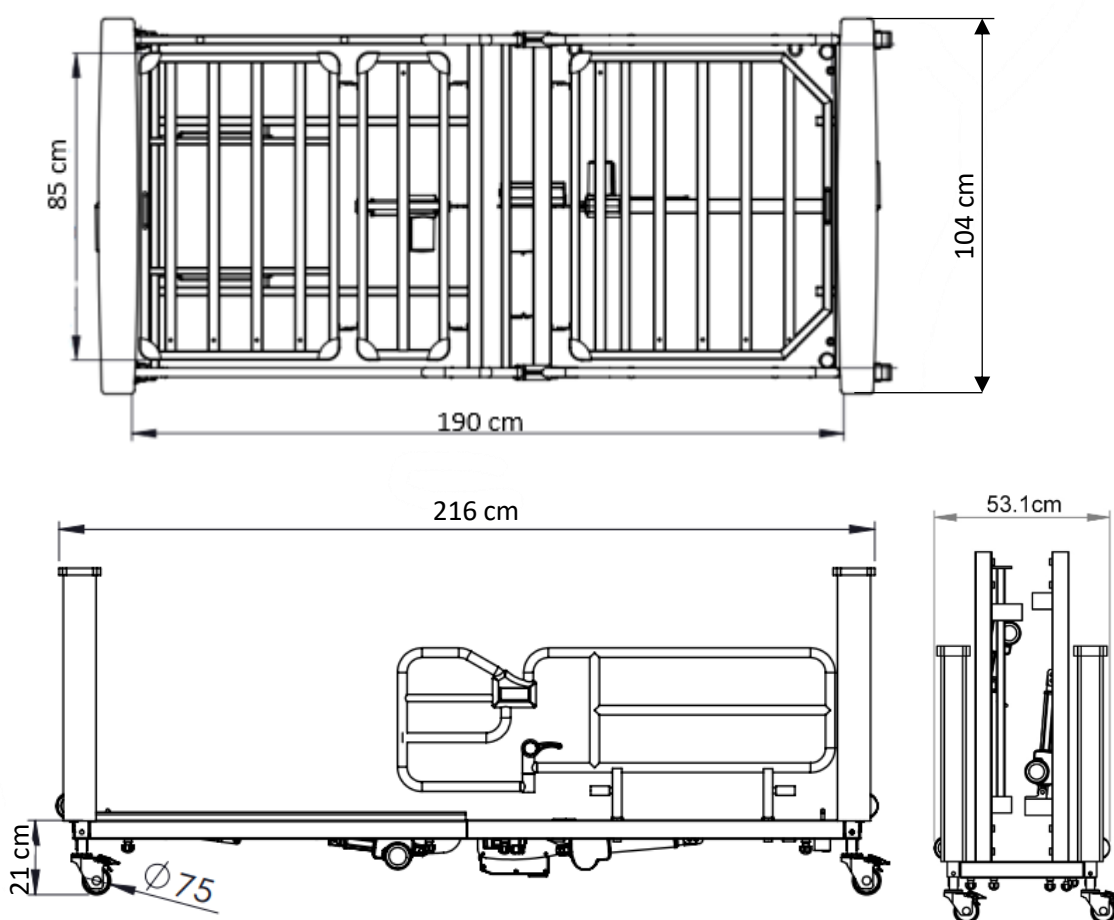

Ingombro letto smontato dotato di kit per utilizzare le ruote come un carrello. Molto pratico per gli spostamenti.

Immagini accessori dedicati



LT-HB20-A01 Openables sponde letto apribili
 Grazie ad un semplice meccanismo, la parte anteriore si può aprire verso l'eterno. (come indicato dalla freccia blu).



LT-HB20-A02 Gun sponde letto abbassabili
 Due sezioni per lato, abbassabili separatamente (vedi freccia blu) particolarmente utili e pratiche durante le assistenze del personale medico/infermieristico.



LT-HB20-A03 + LT-HB20-A03M
 Asta alza malati (Capra) con cinghia e maniglia.

Accessori a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT-HB20-A01	Openables sponde letto apribili	2
LT-HB20-A02	Gun sponde letto abbassabili	4
LT-HB20-A03 + LT-HB20-A03M	Asta alza malati completa di maniglia	1
LT-C20	Chevet comodino laterale	1
AQ-200	Tavolino con piano fisso regolabile in altezza	1
AQ-201	Tavolino con doppio piano, fisso e inclinabile	1
AQ-62	Tavolino altezza regolabile, ripiano inclinabile	1
AQ-63	Tavolino Easy Bridge	1
AQ-10	Sponda letto singola	1
AQ-11	Sponda letto singola con gambe regolabili	1
AQ-12	Sponda letto universale regolabile	1

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT-HB20	Letto elettrico per degenza costituito da testiera, pediera, rete, componenti elettro-meccanici.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	06/06/2024	Emissione scheda tecnica con aggiornamento normativo.
1.1	22/08/2025	Aggiornamento immagini

